

Foam Block

INSTRUCTION BOOKLET

Walkease Foam Blocks are the fast, cost-effective solution for managing mild lameness in cattle.

Attaching a Walkease Foam Block to the healthy claw provides elevation for the injured claw, promoting healing by minimising weight bearing and pressure. With no removal required, Walkease Foam Blocks speed up recovery and mobility keeping your herd productive.

ENGLISH	1	FRANÇAIS	6	NEDERLANDS	11	SUOMI	16
中文	2	ITALIANO	7	NORSK	12	SVENSKA	17
DANSK	3	日本語	8	POLSKI	13	TÜRKÇE	18
DEUTSCH	4	LIETUVIŲ	9	PORTUGUÊS	14		
ESPAÑOL	5	MAGYAR	10	РУССКИЙ	15		



Always use with Walkease Rapid Glue for best results.

Shoof Lameness Scale

A cow's lameness is assessed on a scale of 0 – 3, with 0 representing a normal walk and 3 indicating a severely lame cow.

Assessment is based on indicators such as walking speed, rhythm, stride length, weight bearing, back alignment, and head movement.

Score	Action	Walkease Foam Blocks	Walkease Hybrid Blocks	Walkease Wooden Blocks	Hoofers Cow Clogs
0 No Lameness	Walks evenly, no action required				
1 Mild Lameness	Minor action required, monitor	✓			
2 Moderate Lameness	Action required, examine within 24 hours		✓	✓	
3 Severe Lameness	Urgent action required, treat immediately				✓



Need help? We're here for you.

New Zealand: Shoof International Ltd. 224 Laurent Road North, Cambridge 3493, New Zealand. Ph 0800 800 801

Australia: Shoof International Pty Ltd. 1 International Square, Tullamarine VIC 3043, Australia. Ph 1800 121 801

Chile: Shoof International Chile Ltda. Loteo Las 7 Colinas, Fundo el Castillo, Lote N° 15, Barrio Industrial Osorno, Chile. Ph 800 600 000

www.shoofint.com/walkease

Shoof® and Walkease® are registered trademarks of Shoof International Ltd.



Scan to view Video

Walkease®: Trusted hoof care solutions

Proudly designed and developed in New Zealand by Shoof.

Walkease Foam Blocks are made from a specially-formulated ethylene-vinyl acetate (EVA) material. They are attached to the hoof by use of a cyanoacrylate adhesive. Walkease Foam Blocks are low-cost and easy to apply. Special skill and experience are not required. The directions in this instruction booklet must be adhered to. Any deviation from these instructions will likely result in failure of the adhesive.

Walkease Foam Blocks are intended for use to repair minor hoof injuries. They are ideal for the recovery of such ailments as thin soles, and other conditions needing about 2 weeks of elevation. For serious injuries needing long-term elevation, other systems like Walkease Hybrid Foam Blocks should be considered for use.

Walkease Rapid Glue is different to most other hoof-block adhesives. The natural moisture in the hoof and in the atmosphere is required to activate the glue. **The hoof must not be artificially dried (hot air or alcohol).** In very cold weather, when the air is very dry, more time might be required to activate the glue. (Breathing closely on the glued surface a few times before application to the hoof will help.)

To maintain shelf life the glue should be stored in a refrigerator. Remove from the fridge prior to use. The glue is best used at about room or body temperature.

Fitting procedure:

Treatment of the injured claw must be completed, then the healthy claw is prepared for fitting the block. The Walkease rasp should be used to finish the hoof surface regardless of what other tools may have been used to prepare the hoof. This rasp provides the correct clean and flat surface for the Walkease Foam Block to adhere to. The rasp must be kept clean.

Handle the Walkease Foam Block carefully ensuring the gluing face is kept clean. Test the block for size and shape on the hoof. Choose the correct size that will support all of the hoof wall, but without creating any large overlap.

Always wear gloves when handling Walkease Rapid Glue.

Apply glue using the full contents of the 2 mL single-use tube to secure the block. After about 10 seconds of steady pressure you will feel the block 'grip'. (Possibly longer in cold weather). Promptly after 'grip', lower the hoof so the animal can put full weight on the block to complete the bond. The Walkease Foam Block will not attach properly if weight is not applied before the glue has completely cured.

The glue sets very quickly under the animal's weight. The excess glue is squeezed out and the block conforms to the hoof surface. This improves the surface area contact giving a stronger bond. In cold weather the bond time may increase a little, so give the animal a bit longer standing on the block before releasing it from the crush.

Walkease Foam Blocks do not generally need to be removed. They erode naturally after approximately 2 weeks.

Extra blocks and glue can be ordered through your Shooft dealer.



Fig 1. Treat the injured claw as required.

Fig 2. Use the rasp to prepare the adjacent claw for gluing.

Fig 3. Apply full tube of glue to the Walkease Foam Block.

Fig 4. Press the block firmly onto the healthy claw, overlapping the hoof wall.

Fig 5. Promptly drop the leg for the cattle to put weight on the block.

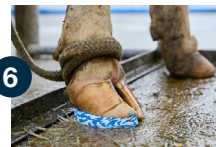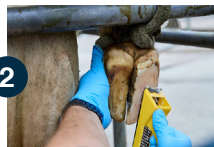

Walkease 泡沫块由特制的乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA) 材料制成。它们通过使用氰基丙烯酸酯胶水固定在蹄上。Walkease 泡沫块价格低廉, 使用方便, 不需要特殊技能或经验。本说明书中的操作指南必须严格遵守, 任何偏离这些说明的操作都可能导致胶水失效。

Walkease 泡沫垫块适用于修复轻微的蹄部损伤。它们非常适合用于薄蹄底等需要大约 2 周抬高疗程的情况。对于需要长时间站立的严重伤害, 应考虑其他系统, 例如 Walkease 混合泡沫块。

Walkease 快速胶与大多数其他蹄块胶水不同。它需要蹄子和空气中的自然水分来激活胶水。**蹄子不得被人工干燥 (如热风或酒精)。**在天气非常寒冷、空气非常干燥的情况下, 胶水的活化可能需要更长时间。(在将胶水涂抹到蹄子之前, 可在胶水表面靠近呼吸几次以帮助活化。)

为了保持保质期, 胶水应储存在冰箱中。使用前请从冰箱取出。胶水在接近室温或体温时使用效果最佳。

使用步骤:

受伤蹄爪的处理必须完成, 然后再准备健康的蹄爪以安装块。无论之前使用了哪些工具来准备蹄子, 都应使用 Walkease 锉刀对蹄面进行修整。这种锉刀可以提供正确、干净且平整的表面, 以便 Walkease 泡沫块能够牢固粘附。锉刀必须保持清洁。

在操作 Walkease 泡沫块时要小心, 确保粘合面保持清洁。在蹄子上测试块的大小和形状。选择合适的尺寸, 以支撑整个蹄壁, 但不要造成过大的重叠。

操作 **Walkease 快速胶时务必佩戴手套。**使用 2 毫升一次性管的全部胶水将泡沫块固定。施加约 10 秒的持续压力后, 你会感觉到块“抓紧”蹄子。(在寒冷天气中可能需要更长时间。)**“抓紧”后立即放下蹄子**, 让动物将全部体重压在泡沫块上, 以完成粘合。如果在胶水完全固化前未施加压力, Walkease 泡沫块将无法正确附着。

胶水在动物体重作用下会非常快速地固化。多余的胶水会被挤出, 泡沫块会紧贴蹄面, 从而增加接触面积, 形成更牢固的粘合。在寒冷天气中, 固化时间可能会稍长, 因此在将动物从固定架释放前, 让它在泡沫块上站立的时间稍微延长一些。

Walkease 泡沫块通常不需要移除。它们在大约两周后自然降解。

额外的泡沫块和快速胶可以通过您的 ShooF 经销商订购。



图1 按要求处理受伤脚爪。

图2 用锉刀为相邻脚爪做好涂胶的准备。

图3 将一整管粘合剂涂抹在Walkease蹄贴上。

图4 将 Walkease 蹄贴牢牢地按压在相邻的蹄子上, 确保覆盖蹄壁。

图5 立即放下蹄子, 让牛将体重压在 Walkease 泡沫块上。

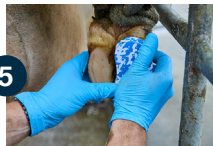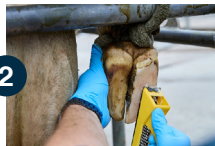

Walkease Skumblokke er lavet af et specialformuleret ethylen-vinylacetat (EVA) materiale. De er fastgjort til hoven ved hjælp af en cyanoacrylatlim. Walkease Skumblokke er billige og nemme at anvende. Der kræves ikke særlig færdighed eller erfaring. De anvisninger, der findes i denne brugsanvisning, skal følges. Enhver afvigelse fra disse anvisninger vil sandsynligvis medføre, at limen fejler.

Walkease Skumblokke er beregnet til at reparere mindre hovskader. De er ideelle til heling af problemer som tynde såler og andre tilstande, der kræver cirka 2 ugers forhøjning. Ved alvorlige skader, der kræver langvarig forhøjning, bør andre systemer som Walkease Hybrid-skumblokke overvejes.

Walkease Hurtig Lim adskiller sig fra de fleste andre hovbloklimer. Den naturlige fugtighed i hoven og i luften er nødvendig for at aktivere limen. **Hoven må ikke tørres kunstigt (f.eks. med varm luft eller alkohol).** I meget koldt vejr, når luften er meget tør, kan det kræve længere tid at aktivere limen. (At ånde nært på den limerede overflade et par gange før påføring på hoven vil hjælpe.)

For at bevare holdbarheden bør limen opbevares i et køleskab. Tag den ud af køleskabet før brug. Limen bruges bedst ved cirka stuetemperatur eller kropstemperatur.

Monteringsprocedure:

Behandlingen af den skadede klo skal være færdig, før den sunde klo forberedes til montering af blokken. Walkease filen bør bruges til at afslutte hovens overflade, uanset hvilke andre værktøjer der måtte være brugt til at forberede hoven. Denne fil giver den korrekte, rene og flade overflade, som Walkease Skumblokken kan binde sig til. Filen skal holdes ren.

Håndter Walkease Skumblokken forsigtigt og sørg for, at limfladen holdes ren. Test blokken for størrelse og form på hoven. Vælg den korrekte størrelse, der understøtter hele hovvæggen, men uden at skabe nogen stor overlappning.

Brug altid handsker, når du håndterer Walkease Hurtig Lim. Påfør limen ved at bruge hele indholdet af den 2 mL engangspakning for at sikre blokken. Efter cirka 10 sekunders konstant tryk vil du mærke, at blokken 'griber'. (Måske længere tid i koldt vejr). Straks efter 'grebet', sænk hoven, så dyret kan lægge fuld vægt på blokken for at fuldføre forbindelsen. Walkease Skumblokken vil ikke fastgøres korrekt, hvis vægt ikke påføres, før limen er helt hærdet.

Limen hærdet meget hurtigt under dyrets vægt. Den overskydende lim presses ud, og blokken tilpasser sig hovens

overflade. Dette forbedrer overfladekontakten og giver en stærkere binding. I koldt vejr kan hærdetiden øges en smule, så giv dyret lidt længere tid til at stå på blokken, før du slipper det fra knusen. Walkease Skumblokke behøver normalt ikke at blive fjernet. De nedbrydes naturligt efter cirka 2 uger.

Ekstra blokke og lim kan bestilles gennem din Shoof-forhandler.

Fig. 1. Behandl den skadede klo efter behov.

Fig. 2. Brug raspen til at forberede den tilstødende klo til limning.

Fig. 3. Påfør hele tuben lim på Walkease Skumblokken

Fig. 4. Tryk blokken fast på den sunde klo, så den overlapper hovvæggen.

Fig. 5. Sænk straks benet, så dyret kan lægge vægt på blokken.



Walkease Schaumböcke bestehen aus einem speziell entwickelten Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Material. Sie werden mit einem Cyanacrylat-Klebstoff am Huf befestigt. Walkease Schaumböcke sind kostengünstig und einfach anzuwenden. Besondere Fähigkeiten oder Erfahrungen sind nicht erforderlich. Die Anweisungen in diesem Handbuch müssen genau befolgt werden. Jegliche Abweichung von diesen Anweisungen kann wahrscheinlich zum Versagen des Klebstoffs führen.

Walkease Schaumböcke sind zur Reparatur kleiner Hufverletzungen vorgesehen. Sie eignen sich ideal für die Behandlung von Problemen wie dünnen Sohlen und anderen Zuständen, die eine etwa 2 wöchige Entlastung erfordern. Voor ernstige verwondingen die langdurig staan vereisen, moeten andere systemen zoals Walkease hybride schuimblokken worden overwogen.

Walkease Rapid Glue unterscheidet sich von den meisten anderen Hufblock-Klebstoffen. Die natürliche Feuchtigkeit im Huf und in der Umgebungsluft ist erforderlich, um den Klebstoff zu aktivieren. **Der Huf darf nicht künstlich getrocknet werden (Heißluft oder Alkohol).** Bei sehr kaltem Wetter, wenn die Luft sehr trocken ist, kann es länger dauern, bis der Klebstoff aktiviert wird. (Mehrmaliges nahes Einatmen auf die zu klebende Fläche vor der Anwendung am Huf kann helfen.)

Om de houdbaarheid te behouden, moet de lijm in een koelkast worden bewaard. Haal de lijm uit de koelkast vóór gebruik. De lijm werkt het best bij ongeveer kamer- of lichaamstemperatuur.

Blockfixierung:

Die Behandlung der verletzten Klaue muss abgeschlossen sein, bevor die gesunde Klaue für das Anbringen des Blocks vorbereitet wird. Die Walkease-Raspel sollte verwendet werden, um die Hufoberfläche fertigzustellen, unabhängig davon, welche anderen Werkzeuge zur Vorbereitung des Hufs verwendet wurden. Diese Raspel sorgt für eine saubere und ebene Fläche, an der der Walkease Schaumblock haftet. Die Raspel muss sauber gehalten werden.

Handhaben Sie den Walkease Schaumblock vorsichtig und achten Sie darauf, dass die Klebefläche sauber bleibt. Prüfen Sie den Block auf Größe und Form am Huf. Wählen Sie die richtige Größe, die die gesamte Hufwand unterstützt, ohne große Überlappungen zu erzeugen.

Tragen Sie stets Handschuhe beim Umgang mit Walkease Rapid Glue. Tragen Sie den Klebstoff mit dem gesamten Inhalt der 2-mL-Einweg-Tube auf, um den Block zu sichern. Nach etwa 10 Sekunden gleichmäßigem Druck spüren Sie, wie der Block „greift“ (bei kaltem Wetter möglicherweise etwas länger). Senken Sie unmittelbar nach dem „Greifen“ den Huf, damit das Tier das volle Gewicht auf den Block bringen kann, um die Verbindung zu vervollständigen. Der Walkease Schaumblock haftet nicht richtig, wenn kein Gewicht aufgebracht wird, bevor der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.

Der Klebstoff härtet unter dem Gewicht des Tieres sehr schnell aus. Überschüssiger Klebstoff wird herausgedrückt und der Block passt sich der Hufoberfläche an. Dies verbessert die Kontaktfläche und sorgt für eine stärkere Verbindung. Bei kaltem Wetter kann die Aushärtezeit etwas länger dauern, lassen Sie das Tier daher etwas länger auf dem Block stehen, bevor Sie es aus dem Standkorb entlassen.

Walkease Schaumböcke müssen in der Regel nicht entfernt werden. Sie zersetzen sich nach ungefähr 2 Wochen natürlich.

Zusätzliche Böcke und Klebstoff können über Ihren Shooof-Händler bestellt werden.



Fig 1. Die verletzte Krallen nach Bedarf behandeln.

Fig 2. Verwenden Sie die Raspel, um die gesunde Klaue für den Kleber vorzubereiten

Fig 3. Tragen Sie die gesamte Tube Klebstoff auf den Walkease Schaumblock auf.

Fig 4. Drücken Sie den Block fest auf die Klaue, sodass er die Hufwand überlappt.

Fig 5. Lassen Sie die Kuh den Fuß sofort durch Auftreten mit dem Eigengewicht belasten.

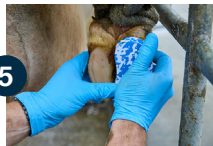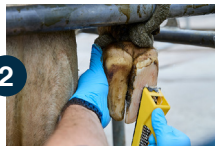

Los bloques Walkease Espuma están hechos de una fórmula especial de acetato etileno-vinilo (EVA). Se pegan a la pezuña mediante el uso de un adhesivo de cianoacrilato. Los bloques Walkease Espuma son de bajo costo y fáciles de aplicar. No se requieren experiencia ni habilidades especiales. Deben respetarse las indicaciones entregadas en estas instrucciones. Cualquier omisión de ellas posiblemente resultará en el fracaso del adhesivo.

Los bloques Walkease Espuma están destinados a reparar lesiones menores de la pezuña. Son ideales para la recuperación de padecimientos tales como suela delgada y otras condiciones que necesitan unas 2 semanas de elevación. Para lesiones graves que necesitan elevación a largo plazo, se debe considerar el uso de otros sistemas como los bloques de espuma híbridos Walkease.

El pegamento Walkease Rápido es diferente a la mayoría de los otros adhesivos para bloques de pezuña. La humedad natural en la pezuña y en la atmósfera es necesaria para activar el pegamento. **La pezuña no debe ser secada artificialmente (aire caliente o alcohol).** En climas muy fríos, cuando el aire es muy seco, podría ser necesario más tiempo para activar el pegamento. (Respirar un par de veces sobre el bloque con pegamento, antes de su aplicación a la pezuña, puede aumentar el nivel de humedad y ayudar a la adherencia).

Para mantener su vida útil, el pegamento debe almacenarse en un refrigerador. Sáquelo del refrigerador antes de usarlo. El pegamento se utiliza mejor a una temperatura cercana a la ambiente o corporal.

Procedimiento de ajuste:

Tratamiento de la pezuña debe ser completo y luego prepararla para usar el bloque.

La lima de pezuñas Walkease puede usarse para terminar la superficie de la pezuña sin importar qué otras herramientas se han utilizado para prepararla.

Esta lima proporciona una superficie correcta, limpia y plana para el uso del bloque Walkease. La lima debe mantenerse siempre limpia.

Maneje el bloque Walkease Espuma cuidadosamente para asegurar que la cara con pegamento se mantenga limpia. Pruebe el bloque adecuado para el tamaño y forma de la pezuña que necesita. Elija el tamaño correcto que cubrirá toda la pared de la pezuña, pero sin que sobresalga.

Utilice siempre guantes al manipular el pegamento Walkease Rápido. Aplique pegamento con moderación al bloque (máximo 2mL). No use pegamento excesivo. El uso de pegamento excesivo causará una falla. Presione firmemente el bloque sobre la pezuña. Después de unos 10 segundos de presión constante se sentirá el bloque firme. (Posiblemente más tiempo en climas fríos). Inmediatamente después baje la pezuña para que el animal pueda poner todo el peso en el bloque y así completar el pegado. El bloque Walkease Espuma no se instalará correctamente si no se aplica peso antes de que el

pegamento seque.

El pegamento se fija muy rápidamente bajo el peso del animal. El exceso de pegamento es aplastado y el bloque se ajusta a la superficie de la pezuña. Esto mejora el contacto de la superficie dando un vínculo más fuerte. En clima frío, el tiempo de pegado puede aumentar un poco, por lo que es necesario dar un poco más de tiempo al animal sobre el bloque antes de soltarlo. Los bloques Walkease Espuma generalmente no necesitan ser retirados. Se descomponen naturalmente después de aproximadamente 2 semanas.

Puede solicitar pegamento y bloques adicionales a través de los distribuidores de ShooF.




Fig 1. Trate la pezuña herida como se requiera.

Fig 2. Use la Lima para preparar la pezuña para luego colocar el pegamento.

Fig 3. Aplique pegamento con moderación al bloque Walkease Espuma.

Fig 4. Presione el bloque firmemente en la pezuña sana, traslapando la pared.

Fig 5. Posteriormente soltar la pata de la vaca para poner su peso sobre el bloque.

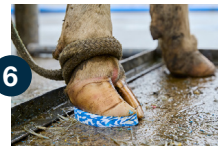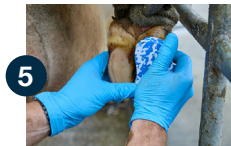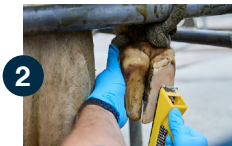

Les blocs de mousse Walkease sont fabriqués à partir d'un matériau spécialement formulé à base d'acétate d'éthylène et de vinyle (EVA). Ils sont fixés au sabot à l'aide d'un adhésif cyanoacrylate. Les blocs de mousse Walkease sont peu coûteux et faciles à appliquer. Aucune compétence particulière ni expérience spécifique n'est requise. Les instructions de ce livret doivent être scrupuleusement respectées. Tout écart par rapport à ces instructions risque de provoquer l'échec de l'adhésif.

Les blocs de mousse Walkease sont destinés à réparer de petites blessures du sabot. Ils sont idéaux pour le rétablissement de problèmes tels que les semelles fines et autres affections nécessitant environ 2 semaines de soulèvement. Pour les blessures graves nécessitant une station debout prolongée, d'autres systèmes tels que les blocs de mousse hybride Walkease doivent être envisagés.

La colle rapide Walkease diffère de la plupart des autres adhésifs pour blocs de sabot. L'humidité naturelle du sabot et de l'air ambiant est nécessaire pour activer la colle. **Le sabot ne doit pas être séché artificiellement (air chaud ou alcool).** Par temps très froid, lorsque l'air est très sec, il peut falloir plus de temps pour activer la colle. (Respirer plusieurs fois près de la surface collée avant l'application sur le sabot peut aider.)

Pour conserver sa durée de vie, la colle doit être stockée au réfrigérateur. Sortez-la du réfrigérateur avant utilisation. La colle s'utilise de préférence à une température proche de la température ambiante ou corporelle.

Mode d'emploi :

Le traitement de la griffe blessée doit être terminé, puis la griffe saine doit être préparée pour la pose du bloc. La râpe Walkease doit être utilisée pour finir la surface du sabot, quel que soit l'outil utilisé précédemment pour préparer le sabot. Cette râpe assure une surface propre et plane adéquate pour que le bloc de mousse Walkease adhère correctement. La râpe doit être maintenue propre.

Manipulez le bloc de mousse Walkease avec précaution, en veillant à ce que la face à coller reste propre. Testez le bloc sur le sabot pour vérifier la taille et la forme. Choisissez la taille appropriée qui soutiendra toute la paroi du sabot, sans créer de chevauchement important.

Portez toujours des gants lors de la manipulation de la colle rapide Walkease. Appliquez la colle en utilisant l'intégralité du tube à usage unique de 2 mL pour fixer le bloc. Après environ 10 secondes de pression constante, vous sentirez le bloc « accrocher » (cela peut prendre un peu plus de temps par temps froid). Immédiatement après que le bloc ait « accroché », abaissez le sabot pour que l'animal puisse mettre tout son poids sur le bloc afin de compléter la fixation. Le bloc de mousse Walkease ne s'attachera pas correctement si le poids n'est pas appliqué avant que la colle ne soit complètement durcie.

La colle durcit très rapidement sous le poids de l'animal. L'excédent de colle est expulsé et le bloc épouse parfaitement la surface du sabot. Cela augmente la surface de contact, offrant ainsi une fixation plus solide. Par temps froid, le temps de prise peut être légèrement plus long, laissez donc l'animal se tenir un peu plus longtemps sur le bloc avant de le relâcher de l'enclos.

Les blocs de mousse Walkease n'ont généralement pas besoin d'être retirés. Ils se décomposent naturellement après environ 2 semaines.

Des blocs supplémentaires et de la colle peuvent être commandés auprès de votre revendeur Shooof.


Fig 1. Nettoyer et soigner l'onglon blessé.

Fig 2. Utiliser la râpe pour préparer l'onglon adjacent.

Fig 3. Appliquez le tube de colle entier sur le bloc de mousse Walkease.

Fig 4. Enfoncez fermement le bloc sur la griffe saine, en le faisant chevaucher la paroi du sabot.

Fig 5. Relâcher aussitôt la patte, ainsi la vache peut appliquer tout son poids sur la talonnette

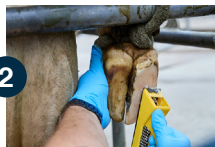

Blocchi in Schiuma Walkease sono realizzati con un materiale appositamente formulato in acetato di etilenevinile (EVA). Vengono fissati allo zoccolo tramite l'uso di un adesivo cianoacrilato. I Blocchi in Schiuma Walkease sono economici e facili da applicare. Non sono necessarie abilità o esperienze particolari. Le istruzioni contenute in questo manuale devono essere seguite. Ogni deviazione da queste istruzioni potrebbe portare al fallimento dell'adesivo.

Blocchi in Schiuma Walkease sono progettati per riparare lesioni minori agli zoccoli. Sono ideali per il recupero di problematiche come suole sottili e altre condizioni che richiedono circa 2 settimane di elevazione. Per lesioni gravi che richiedono elevazione a lungo termine, si dovrebbe prendere in considerazione l'uso di altri sistemi come i blocchi di schiuma ibrida Walkease.

Colla Rapida Walkease è diversa dalla maggior parte degli altri adesivi per blocchi da zoccolo. L'umidità naturale dello zoccolo e dell'atmosfera è necessaria per attivare la colla. **Lo zoccolo non deve essere essiccato artificialmente (con aria calda o alcol).** In condizioni climatiche molto fredde, quando l'aria è molto secca, potrebbe essere necessario più tempo per attivare la colla. (Soffiare delicatamente sulla superficie incollata alcune volte prima dell'applicazione allo zoccolo aiuterà).

Per mantenerne la durata, la colla deve essere conservata in frigorifero. Togliere dal frigorifero prima dell'uso. La colla dà i migliori risultati a una temperatura prossima a quella ambiente o corporea.

Modo d'uso:

Il trattamento della zampa danneggiata deve essere completato, quindi la zampa sana deve essere preparata per l'applicazione del blocco. La raspa Walkease deve essere utilizzata per rifinire la superficie dello zoccolo, indipendentemente dagli altri strumenti che potrebbero essere stati utilizzati per preparare lo zoccolo. Questa raspa fornisce la superficie pulita e piatta corretta per permettere al Blocco in Schiuma Walkease di aderire. La raspa deve essere mantenuta pulita.

Maneggiare con cura il Blocco in Schiuma Walkease, assicurandosi che la superficie per l'incollaggio rimanga pulita. Testare il blocco per dimensione e forma sullo zoccolo. Scegliere la dimensione corretta che supporti tutta la parete dello zoccolo, senza creare sovrapposizioni eccessive.

Indossare sempre guanti quando si maneggia la Colla Rapida Walkease. Applicare la colla usando l'intero contenuto del tubo monouso da 2 mL per fissare il blocco. Dopo circa 10 secondi di pressione costante, si sentirà il blocco che 'afferra'. (Possibilmente ci vorrà più tempo in caso di clima freddo). Subito dopo che il blocco ha 'afferrato', abbassare lo zoccolo affinché l'animale possa mettere il peso completo sul blocco per completare la legatura. Il Blocco in Schiuma Walkease non si attaccherà correttamente se il peso non viene applicato prima che la colla si sia completamente indurita.

La colla si indurisce molto rapidamente sotto il peso dell'animale. L'eccesso di colla viene espulso e il blocco si adatta alla superficie dello zoccolo. Questo migliora il contatto della superficie, creando una connessione più forte. In climi freddi, il tempo di adesione potrebbe aumentare leggermente, quindi lasciare l'animale in piedi sul blocco un po' più a lungo prima di rilasciarlo dalla trappola. Il Blocchi in Schiuma Walkease generalmente non necessitano di essere rimossi. Si degradano naturalmente dopo circa 2 settimane.

I blocchi e la colla aggiuntivi possono essere ordinati tramite il vostro rivenditore Shooof.


Fig. 1. Trattare la zampa danneggiata come richiesto.

Fig. 2. Usare la raspa per preparare la zampa adiacente per l'incollaggio.

Fig. 3. Applicare l'intero tubo di colla al Blocco in Schiuma Walkease.

Fig. 4. Premere saldamente il blocco sulla zampa sana, sovrapponendo la parete dello zoccolo.

Fig. 5. Abbassare prontamente la zampa affinché il bestiame possa mettere il peso sul blocco.

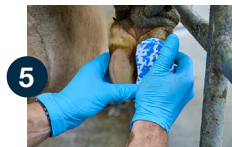

WALKEASEフォームブロックは、特別に配合されたエチレン-ビニルアセテート(EVA)素材で作られています。これらは、シアノアクリレート接着剤を使用して蹄に取り付けられます。WALKEASEフォームブロックは低コストで、簡単に取り付けすることができます。特別な技術や経験は必要ありません。この取扱説明書の指示に従う必要があります。指示から逸脱すると、接着剤が正しく機能しない可能性があります。

WALKEASEフォームブロックは、軽度の蹄の損傷を修復するために使用されます。薄い蹄底などの症状や、約2週間の挙上が必要な他の状態の回復に最適です。長時間立っている必要がある重傷の場合は、WALKEASE ハイブリッド フォーム ブロックなどの他のシステムを検討する必要があります。

WALKEASEラピッドグルーは、ほとんどの他の蹄用ブロック接着剤とは異なります。接着剤を活性化させるためには、蹄や周囲の自然な水分が必要です。**蹄を人工的に乾燥させてはいけません(温風やアルコールは不可)**。非常に寒く、空気が乾燥している場合は、接着剤の活性化により多くの時間が必要になることがあります。(蹄に塗布する前に、接着面に数回息を吹きかけると効果的です。)

保存期間を維持するために、接着剤は冷蔵庫で保管してください。使用前に冷蔵庫から取り出してください。接着剤は室温または体温程度で使用するのが最も効果的です。

装着手順:

傷ついた蹄の治療を完了させた後、健康な蹄をブロック装着用に準備します。蹄の準備に他の道具が使用されていたとしても、WALKEASEラズプを使って蹄の表面を仕上げる必要があります。このラズプは、WALKEASEフォームブロックがしっかりと接着できる、正しい清潔で平らな表面を提供します。ラズプは常に清潔に保たなければなりません。

WALKEASEフォームブロックは、接着面を清潔に保つよう注意して扱ってください。ブロックのサイズと形状を蹄に合わせて確認します。蹄壁全体を支えられる適切なサイズを選び、大きな重なりができないようにしてください。

WALKEASEラピッドグルーを扱う際は、必ず手袋を着用してください。ブロックを固定するために、2MLの使い切りチューブの全量を塗布します。約10秒間、一定の圧力をかけるとブロックが「グリップ」する感覚がわかります。(寒冷時は時間が長くなる場合があります。)**「グリップ」感を確認したらすぐに蹄を下ろし、動物がブロックに全体重をかけられるようにして接着を完了させます。**接着剤が完全に硬化する前に体重をかけないと、WALKEASEフォームブロックは正しく装着されません。

接着剤は動物の体重下で非常に速く硬化します。余分な接着剤は押し出され、ブロックが蹄の形状に沿って密着します。これにより接触面積が増え、より強力な接着が得られます。寒冷時には硬化時間が少し長くなることもあるため、動物をプロ

ックの上に少し長めに立たせてからクラッシュ装置から解放してください。

WALKEASEフォームブロックは通常、取り外す必要はありません。それらは約2週間後に自然に分解されます。追加のブロックや接着剤は、お近くのSHOOFディーラーを通じて注文可能です。

図1 必要に応じて、蹄病の処置を行ってください。



図2 健康蹄に、やすりを使って、接着の準備をしてください。

図3 WALKEASE フォーム ブロックにチューブいっぱい接着剤を塗ります。

図4 健康蹄の蹄壁に沿ってあてられたブロックを強く押し付けてください。

図5 迅速に肢をおろして、ブロックに牛の体重を乗せてください。

注意:裏ページにあるチャートより、ブロックを押し付ける時間を確認して下さい。

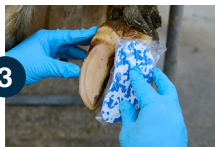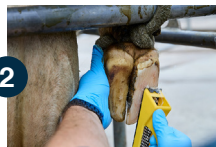

Putų blokai Walkease pagaminti iš specialiai suformuoto etileno-
vinilo acetato (EVA) medžiagos. Jie prie kanopos tvirtinami
naudojant cianoakrilato klijus. Putų blokai Walkease yra pigūs
ir lengvai naudojami. Nereikia ypatingų įgūdžių ir patirties.
Būtina laikytis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. Bet koks
nukrypimas nuo šių nurodymų gali sukelti klijų neveikimą.

Putų blokai Walkease skirti naudoti smulkiems kanopų
sužalojimams taisyti. Jie idealiai tinka tokių ligų kaip plonos padai ir
kitos būklės, reikalaujančios apie 2 savaičių aukščio, atsigavimui.
Sunkių sužalojimų atveju, kai reikia ilgai stovėti, reikėtų apsvarstyti
kitas sistemas, pvz., Walkease hibridinius putplasčio blokus.

Greiti klijai Walkease skiriasi nuo daugumos kitų klijų,
naudojamų kanopų blokams. Natūrali drėgmė kanopoje
ir aplinkoje yra būtina, kad klijai aktyvuotųsi. **Kanopa
neturėtų būti dirbtinai džiovinama (karštu oru ar
alkoholiu).** Labai šaltu oru, kai oras labai sausas, gali prireikti
daugiau laiko, kad klijai aktyvuotųsi. (Keletą kartų prieš
naudojant, kvėpavimas ant klijuojamos paviršiaus padės).

Norint išlaikyti tinkamumo laiką, klijus reikia laikyti šaldytuve.
Prieš naudojimą išimkite juos iš šaldytuvo. Klijai geriausiai veikia
esant maždaug kambario arba kūno temperatūrai.

Uždėjimas:

Sužeistos kanopos gydymas turi būti baigtas, tada sveika
kanopa paruošiama blokui pritvirtinti. Walkease raspa reikia
naudoti, kad baigtumėte kanopos paviršių, nepriklausomai
nuo kitų įrankių, kurie galėjo būti naudojami kanopai paruošti.
Ši raspa suteikia teisingą, švarų ir lygų paviršių, kad Putų
blokas Walkease gerai priliptų. Raspa turi būti laikoma švari.

Rūpinkitės Putų blokais Walkease, užtikrinant, kad klijavimo
paviršius būtų švarus. Patikrinkite bloką dėl dydžio ir formos
ant kanopos. Pasirinkite tinkamą dydį, kuris palaikytų visą
kanopos sienelę, tačiau nesukurtų didelės persidengimo.

**Visada dėvėkite pirštines, kai dirbate su Greitaisiais klijais
Walkease.** Naudodami visą 2 mL vienkartinio naudojimo tūbelės
turinį, užtepkite klijų, kad pritvirtintumėte bloką. Po maždaug
10 sekundžių nuolatinio spaudimo pajusite, kad blokas „suima“
(galbūt ilgiau šaltame ore). Tuoj po to, kai blokas „suima“,
nuleiskite kanopą, kad gyvūnas galėtų uždėti visą svorį ant bloko
ir užbaigti jungimą. Putų blokas Walkease nesitvirtins tinkamai,
jei svoris nebus pritaikytas, kol klijai nebus visiškai sukietėję.

Klijai labai greitai stingsta po gyvūno svoriu. Pertekliniai klijai

išspaudžiami, o blokas prisitaiko prie kanopos paviršiaus. Tai
pagerina paviršiaus kontaktą, suteikdama stipresnį ryšį. Šaltame
ore sujungimo laikas gali šiek tiek padidėti, todėl leiskite gyvūnui
šiek tiek ilgiau pabūti ant bloko, prieš išleisdami jį iš narvo.

Putų blokai Walkease paprastai nereikia pašalinti. Jos natūraliai
suyra maždaug per 2 savaites.

Papildomi blokai ir klijai gali būti užsakomi per jūsų ShooF
pardavėją.



Fig. 1. Gydykite sužeistą kanopą pagal poreikį.

Fig. 2. Naudokite rasą, kad paruoštumėte gretimą kanopą
klijavimui.

Fig. 3. Užtepkite visą klijų tūbelės turinį ant Putų bloko Walkease

Fig. 4. Svirtį bloką tvirtai ant sveikos kanopos, uždengiant
kanopos sienelę.

Fig. 5. Tuoj pat nuleiskite kojelę, kad gyvūnas galėtų uždėti svorį
ant bloko.

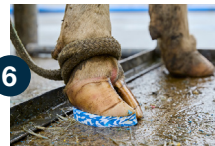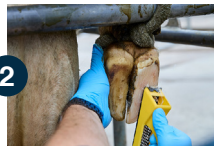

A Walkease habblokkok különleges, etilén-vinil-acetát (EVA) anyagból készülnek. A patára való rögzítésük cián-akrilát ragasztóval történik. A Walkease habblokkok alacsony költségűek és könnyen alkalmazhatók. Különleges készsége vagy tapasztalatra nincs szükség. A jelen használati útmutatóban leírt utasításokat be kell tartani. Bármilyen eltérés ezekből az utasításokból valószínűleg a ragasztó sikertelenségét eredményezi.

A Walkease habblokkok kisebb patasérülések javítására szolgálnak. Ideálisak olyan problémák felépüléséhez, mint a vékony talpak és más állapotok, amelyek körülbelül 2 hét emelést igényelnek. Súlyos sérülések esetén, amelyek hosszan tartó állást igényelnek, más rendszereket, például Walkease hibrid habblokkokat kell fontolóra venni.

A Walkease Rapid Glue különbözik a legtöbb más pata-blokk ragasztótól. A ragasztó aktiválásához szükség van a pata és a levegő természetes nedvességtartalmára. **A patát nem szabad mesterségesen szárítani (forró levegővel vagy alkohollal).** Nagyon hideg időben, amikor a ragasztó nagyon száraz, több időre lehet szükség a ragasztó aktiválásához. (Hasznos lehet, ha a ragasztott felületre néhányszor közelről lélegzik a pata felhelyezése előtt.)

A szavatosság megőrzése érdekében a ragasztót hűtőben kell tárolni. Használat előtt vegye ki a hűtőből. A ragasztót legjobban környezeti vagy testhőmérséklet körül érdemes használni.

A felhelyezés menete:

A sérült pata kezelését először teljesen el kell végezni, majd az egészséges patát kell előkészíteni a blokk felhelyezéséhez. A Walkease reszelőt (rasp) használjuk a patafelszín végső simításához, függetlenül attól, hogy milyen más eszközöket használtak a pata előkészítésére. Ez a reszelő biztosítja a megfelelő, tiszta és sík felületet, amelyhez a Walkease habblokk megfelelően tapad. A reszelőt tisztán kell tartani.

A Walkease habblokkot óvatosan kezeljük, ügyelve arra, hogy a ragasztandó felület tiszta maradjon. Ellenőrizzük a blokk méretét és alakját a patán. Válasszuk ki a megfelelő méretet, amely az egész patafalat támogatja, de nem hoz létre nagy átfedést.



Mindig viseljük kesztyűt a Walkease Rapid Glue használata közben. Vigyük fel a ragasztót a 2 mL-es, egyszer használatos tubus teljes tartalmával a blokk rögzítéséhez. Körülbelül 10 másodpercnyi állandó nyomás után érezni fogjuk, hogy a blokk „megfog” (hideg időben ez tovább is tarthat). Amint a blokk megfogott, azonnal engedjük le a patát, hogy az állat teljes súlyával ráhelyezze a blokkra a lábát, ezzel befejezve a kötést. A Walkease habblokk nem fog megfelelően tapadni, ha a ragasztó teljes kikeményedése előtt nem helyezzük rá súlyt.

A ragasztó az állat súlya alatt nagyon gyorsan megköt. A felesleges ragasztó kifolyik, és a blokk a patafelszínhez igazodik. Ez növeli a felületi érintkezést, erősebb kötést biztosítva. Hideg időben a kötési idő kissé megnövekedhet, ezért hagyjuk az állatot egy kicsit tovább állni a blokk tetején, mielőtt elengednénk a tartókeretből.

A Walkease habblokkokat általában nem kell eltávolítani. Körülbelül 2 hét után természetes módon lebomlanak.

További blokkok és ragasztó a Shooof-kereskedőjén keresztül rendelhetők.

1. ábra: Szükség szerint kezelje a sérült talpat.
2. ábra: A reszelővel készítse elő a talpat a ragasztásra.
3. ábra: Vigyen fel egy teljes tubus ragasztót a Walkease habtömbre.
4. ábra: Határozott mozdulattal nyomja rá a tömböt az egészséges talpra, úgy, hogy túlnyúljon a pata falán.
5. ábra: Azonnal engedje le a lábat, hogy az állat ránehezedhessen a tömbre.

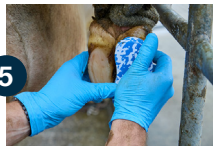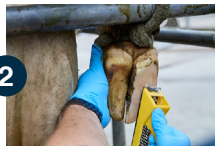

Walkease Schuimblokken zijn gemaakt van een speciaal geformuleerd ethyleen-vinylacetaat (EVA) materiaal. Ze worden aan de hoof bevestigd met behulp van een cyanoacrylaat-lijm. Walkease Schuimblokken zijn goedkoop en eenvoudig aan te brengen. Er zijn geen speciale vaardigheden of ervaring vereist. De aanwijzingen in deze handleiding moeten worden opgevolgd. Elke afwijking van deze instructies zal waarschijnlijk leiden tot falen van de lijm.

Walkease Schuimblokken zijn bedoeld voor het herstellen van kleine hoefbeschadigingen. Ze zijn ideaal voor het herstel van aandoeningen zoals dunne zolen en andere aandoeningen die ongeveer 2 weken verhoging vereisen. Voor ernstige verwondingen die langdurig staan vereisen, moeten andere systemen zoals Walkease Hybrid Schuimblokken worden overwogen.

Walkease Snellijm is anders dan de meeste andere hoefblokken. De natuurlijke vochtigheid in de hoof en in de atmosfeer is nodig om de lijm te activeren. **De hoof mag niet kunstmatig worden gedroogd (warmte of alcohol).** In zeer koud weer, wanneer de lucht erg droog is, kan het langer duren om de lijm te activeren. (Een paar keer dicht bij het gelijmde oppervlak ademen voor de applicatie op de hoof zal helpen.)

Om de houdbaarheid te behouden, moet de lijm in de koelkast worden bewaard. Haal de lijm uit de koelkast voordat u deze

gebruikt. De lijm werkt het beste bij ongeveer kamertemperatuur of lichaamstemperatuur.

Aanmeet procedure:

De behandeling van de gewonde klauw moet worden voltooid, waarna de gezonde klauw wordt voorbereid voor het bevestigen van het blok. De Walkease rasp moet worden gebruikt om het hoefoppervlak af te werken, ongeacht welke andere gereedschappen mogelijk zijn gebruikt om de hoof voor te bereiden. Deze rasp zorgt voor een schone, vlakke en juiste oppervlakte, zodat de Walkease Schuimblok goed hecht. De rasp moet schoon worden gehouden.

Behandel de Walkease Schuimblok zorgvuldig en zorg ervoor dat het kleefoppervlak schoon blijft. Test het blok op grootte en vorm op de hoof. Kies de juiste maat die de gehele hoofwand ondersteunt, zonder grote overlappen te creëren.

Draag altijd handschoenen bij het hanteren van Walkease Snellijm. Breng de lijm aan door de volledige inhoud van de 2 mL eenmalige tube te gebruiken om het blok vast te zetten. Na ongeveer 10 seconden constante druk zult u voelen dat het blok 'pakt' (mogelijk langer in koud weer). Direct na het 'pakken', laat de hoof zakken zodat het dier volledig gewicht op het blok kan zetten om de verbinding te voltooien. De Walkease Schuimblok

zal niet goed hechten als het gewicht niet wordt aangebracht voordat de lijm volledig is uitgehard.

De lijm zet zeer snel onder het gewicht van het dier. Het overtollige lijm wordt eruit gedrukt en het blok past zich aan het hoefoppervlak aan. Dit verbetert het contactoppervlak, waardoor de verbinding sterker wordt. Bij koud weer kan de bindingstijd iets langer zijn, dus geef het dier wat langer de tijd om op het blok te staan voordat je het uit de knijper haalt.

Walkease Schuimblokken hoeven over het algemeen niet te worden verwijderd. Ze eroderen vanzelf na ongeveer 2 weken. Extra blokken en lijm kunnen via uw Shoof dealer worden besteld..


Fig 1. Behandel de gewonde klauw zoals vereist.

Fig 2. Gebruik de rasp om de aangrenzende klauw voor te bereiden op het lijmen.

Fig 3. Breng de volledige inhoud van de lijmtube aan op het Walkease Schuimblok.

Fig 4. Druk het blok stevig op de gezonde klauw, zodat het de hoofwand overlapt.

Fig 5. Laat het been onmiddellijk zakken, zodat het vee gewicht op het blok kan zetten.

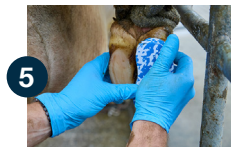

Walkease Skumblokker er laget av et spesialutviklet etylen-vinylacetat (EVA)-materiale. De festes til hoven ved bruk av Raskt Lim. Walkease Skumblokker er rimelige og enkle å påføre. Spesiell ferdighet eller erfaring er ikke nødvendig. Instruksjonene i dette hefte må følges nøye. Avvik fra disse instruksjonene vil sannsynligvis føre til at limet svikter.

Walkease Skumblokker er ment for bruk ved reparasjon av mindre hovskader. De er ideelle for behandling av problemer som tynne såler og andre tilstander som krever cirka 2 ukers avlastning. For alvorlige skader som krever langvarig stående, bør andre systemer som Walkease hybridskumblokker vurderes.

Walkease Raskt Lim skiller seg fra de fleste andre hovblokk-lim. Naturlig fuktighet i hoven og i luften er nødvendig for å aktivere limet. **Hoven må ikke tørkes kunstig (varmluft eller alkohol).** I svært kaldt vær, når luften er veldig tørr, kan det kreves mer tid for å aktivere limet. (Å puste lett på den limte overflaten noen ganger før påføring på hoven kan hjelpe.)

For å opprettholde holdbarheten bør limet oppbevares i kjøleskap. Ta det ut av kjøleskapet før bruk. Limet fungerer best ved omtrent rom- eller kroppstemperatur.

Prosedyren ved festing:

Behandlingen av den skadede kloen må være fullført, deretter forberedes den friske kloen for montering av blokken. Walkease rasp skal brukes for å ferdigstille hovoverflaten, uansett hvilke andre verktøy som kan ha blitt brukt til å forberede hoven. Denne raspen gir en korrekt, ren og flat overflate for at Walkease Skumblokk skal feste seg. Raspen må holdes ren.

Hånder Walkease Skumblokk forsiktig og sørg for at limflaten holdes ren. Test blokken for størrelse og form på hoven. Velg riktig størrelsesomstøtter hele hovveggen, uten å skape store overlapp.

Alltid bruk hansker når du håndterer Walkease Raskt Lim. Påfør limet ved å bruke hele innholdet i 2 mL engangsrøret for å feste blokken. Etter omtrent 10 sekunder med jevnt trykk vil du føle at blokken «griper». (Muligens lengre tid i kaldt vær). Umiddelbart etter at blokken har «grepet», senk hoven slik at dyret kan legge full vekt på blokken for å fullføre bindingen. Walkease Skumblokk vil ikke feste ordentlig hvis ikke vekt påføres før limet er helt herdet.

Limet stivner svært raskt under dyrets vekt. Overflødig lim presses ut, og blokken tilpasser seg hovoverflaten. Dette øker kontaktflaten og gir en sterkere binding. I kaldt vær kan

bindingstiden bli litt lengre, så la dyret stå litt lenger på blokken før det slippes ut av smedkassen.

Walkease Skumblokker trenger vanligvis ikke å fjernes. De brytes naturlig ned etter omtrent 2 uker.

Ekstra blokker og lim kan bestilles gjennom din Shoof-forhandler.


Fig. 1. Gi den skadde hoven nødvendig behandling.

Fig. 2. Bruk raspen for å klargjøre hoven for liming.

Fig. 3. Påfør en hel tube med lim på Walkease-skumblokken.

Fig. 4. Press klossen bestemt på den sunne hoven, slik at den overlapper hovveggen.

Fig. 5. Senk foten slik at dyret får satt vekten på klossen

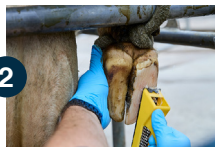

Bloki piankowe Walkease są wykonane ze specjalnie opracowanego materiału octan etylenowo-winyłowy (EVA). Mocuje się je do kopyta za pomocą kleju cyjanoakrylowego. Bloki piankowe Walkease są tanie i łatwe w użyciu. Nie są wymagane specjalne umiejętności ani doświadczenie. Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w tej broszurze. Jakiegokolwiek odstępstwo od tych zaleceń może spowodować niepowodzenie klejenia.

Bloki piankowe Walkease są przeznaczone do naprawy drobnych urazów kopyta. Są idealne do leczenia takich schorzeń jak cienkie podeszwy oraz innych przypadków wymagających podniesienia kopyta na około 2 tygodnie. W przypadku poważnych obrażeń wymagających długotrwałego stania należy rozważyć inne systemy, takie jak hybrydowe bloki piankowe Walkease.

Szybki klej Walkease różni się od większości innych klejów do bloków kopytowych. Do aktywacji kleju wymagana jest naturalna wilgoć w kopycie oraz w atmosferze. **Kopyta nie wolno sztucznie osuszać (ciepłym powietrzem lub alkoholem).** W bardzo zimną i suchą pogodę może być potrzebne więcej czasu na aktywację kleju. (Kilka oddechów skierowanych w stronę posmarowanej powierzchni przed nałożeniem na kopyto może pomóc w aktywacji kleju.)

Aby zachować trwałość, klej należy przechowywać w lodówce. Przed użyciem wyjmij go z lodówki. Klej najlepiej stosować w temperaturze pokojowej lub ciała.

Sposób mocowania:

Leczenie uszkodzonej kopyta musi zostać zakończone, a następnie zdrowa kopyto przygotowane do zamocowania bloku. Do wykończenia powierzchni kopyta należy użyć raspa Walkease, niezależnie od innych narzędzi, które mogły być użyte do przygotowania kopyta. Ten rasp zapewnia prawidłową, czystą i płaską powierzchnię, do której przylega Walkease Foam Block. Rasp należy utrzymywać w czystości.

Walkease Foam Block należy obsługiwać ostrożnie, dbając o to, aby powierzchnia do klejenia pozostała czysta. Przetestuj blok pod kątem rozmiaru i kształtu na kopycie. Wybierz odpowiedni rozmiar, który będzie podpierał całą ścianę kopyta, ale nie będzie tworzył dużych nałożonych fragmentów.

Zawsze noś rękawice podczas obsługi Walkease Rapid Glue. Nałóż klej, używając całej zawartości jednorazowej tubki 2 mL, aby zabezpieczyć blok. Po około 10 sekundach stałego nacisku poczujesz, że blok „chwyci”. (W zimnej pogodzie czas ten może być dłuższy). Natychmiast po „chwytaniu” opuść kopyto, aby zwierzę mogło położyć pełną wagę na bloku i zakończyć połączenie. Walkease Foam Block nie przyczepi się prawidłowo, jeśli waga nie zostanie zastosowana przed całkowitym utwardzeniem kleju.

Klej utwardza się bardzo szybko pod ciężarem zwierzęcia. Nadmiar kleju zostaje wyciśnięty, a blok dopasowuje się do powierzchni kopyta. Poprawia to kontakt powierzchniowy, zapewniając mocniejsze połączenie. W zimnej pogodzie czas utwardzania może się nieco wydłużyć, dlatego pozwól zwierzęciu stać na bloku nieco dłużej, zanim zostanie zwolnione z kagańca.

Walkease Foam Blocks zazwyczaj nie wymagają usuwania. One naturalnie erodują po około 2 tygodniach.

Dodatkowe bloki i klej można zamówić u swojego dealera Shooof.



Rys. 1 Leczenie uszkodzonej racicy zgodnie z potrzebą.

Rys. 2 Zastosuj tamnik, aby przygotować racicę do mocowania bloczka.

Rys. 3 Nałóż całą zawartość tubki kleju na blok Walkease Foam.

Rys. 4 Dociśnij blok mocno do zdrowej racicy, zachodząc na ścianę racicy.

Rys. 5 Niezwłocznie opuść kopyto, aby zwierzę mogło na nim stanąć całym ciężarem ciała.

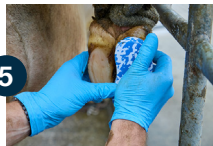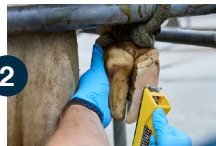

Os Blocos de Espuma Walkease são feitos de um material de acetato de etileno-vinil (EVA) especialmente formulado. Eles são fixados ao casco usando um adesivo de cianoacrilato. Os Blocos de Espuma Walkease são de baixo custo e fáceis de aplicar. Não são necessárias habilidades ou experiência especiais. As instruções contidas neste manual devem ser seguidas rigorosamente. Qualquer desvio dessas instruções provavelmente resultará na falha do adesivo.

Os Blocos de Espuma Walkease destinam-se ao reparo de pequenas lesões no casco. São ideais para a recuperação de problemas como solas finas e outras condições que necessitam de cerca de 2 semanas de elevação. Para lesões graves que exijam permanência prolongada, outros sistemas, como os blocos de espuma híbridos Walkease, devem ser considerados.

O Cola Rápida Walkease é diferente da maioria dos outros adesivos para blocos de casco. A umidade natural no casco e na atmosfera é necessária para ativar a cola. **O casco não deve ser seco artificialmente (ar quente ou álcool).** Em climas muito frios, quando o ar está muito seco, pode ser necessário mais tempo para ativar a cola. (Respirar próximo à superfície colada algumas vezes antes da aplicação no casco ajuda.)

Para manter a vida útil, a cola deve ser armazenada na geladeira. Retire da geladeira antes de usar. A cola é melhor utilizada em temperatura ambiente ou corporal.

Procedimento de ajustamento:

O tratamento da garra lesionada deve ser concluído, e então a garra saudável deve ser preparada para a aplicação do bloco. A lima Walkease deve ser utilizada para finalizar a superfície do casco, independentemente de quais outras ferramentas tenham sido usadas para prepará-lo. Esta lima fornece a superfície correta, limpa e plana, para que o Bloco de Espuma Walkease adira adequadamente. A lima deve ser mantida limpa.

Manuseie o Bloco de Espuma Walkease com cuidado, garantindo que a face de colagem permaneça limpa. Teste o bloco no casco quanto ao tamanho e formato. Escolha o tamanho correto que suporte toda a parede do casco, mas sem criar sobreposição excessiva.

Use sempre luvas ao manusear a Cola Rápida Walkease.

Aplique a cola usando todo o conteúdo do tubo de 2 mL de uso único para fixar o bloco. Após cerca de 10 segundos de pressão constante, você sentirá o bloco "agarrar". (Pode levar mais tempo em clima frio). Logo após o "agarrar", abaixe o casco para que o animal possa colocar todo o peso sobre o bloco, completando a fixação. O Bloco de Espuma Walkease não se prenderá corretamente se o peso não for aplicado antes que a cola esteja totalmente curada.

A cola endurece muito rapidamente sob o peso do animal. O excesso de cola é espremido e o bloco se ajusta à superfície

do casco. Isso aumenta a área de contato, proporcionando uma ligação mais forte. Em clima frio, o tempo de fixação pode aumentar um pouco, então deixe o animal ficar mais tempo sobre o bloco antes de liberá-lo do brete.

Os Blocos de Espuma Walkease geralmente não precisam ser removidos. Eles se degradam naturalmente após aproximadamente 2 semanas.

Blocos e cola extras podem ser encomendados através do seu revendedor Shoof.



Fig 1. Trate o casco lesado conforme seja necessário.

Fig 2. Use o raspador para preparar o casco para a colagem.

Fig 3. Aplique todo o conteúdo do tubo de cola no bloco de espuma Walkease.

Fig 4. Pressione o bloco firmemente sobre a garra saudável, sobrepondo-o à parede do casco.

Fig 5. Assim que possível, deixe a vaca aplicar seu peso no bloco.

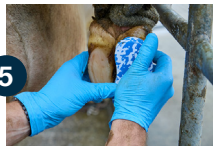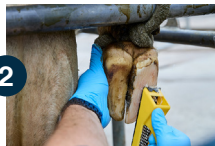

Пенные блоки Walkease изготовлены из специально разработанного материала этилен-винил ацетат (EVA). Они крепятся к копыту с помощью цианоакрилатного клея. Пенные блоки Walkease недорогие и простые в применении. Специальные навыки и опыт не требуются. Необходимо строго соблюдать инструкции, приведённые в этой брошюре. Любое отклонение от этих инструкций, скорее всего, приведёт к неудаче клеевого соединения.

Пенные блоки Walkease предназначены для ремонта незначительных травм копыта. Они идеально подходят для восстановления при таких проблемах, как тонкая подошва, и других состояниях, требующих подъёма копыта примерно на 2 недели. При тяжелых травмах, требующих длительного стояния, следует рассмотреть возможность использования других систем, таких как гибридные пенопластовые блоки Walkease.

Быстрый клей Walkease отличается от большинства других клеев для блоков копыт. Для активации клея требуется естественная влажность копыта и воздуха. **Копыто не должно быть искусственно высушено (горячим воздухом или спиртом).** В очень холодную погоду, когда воздух очень сухой, может потребоваться больше времени для активации клея. (Несколько раз подышав на поверхность с клеем перед нанесением на копыто, можно повысить влажность и улучшить адгезию.)

Для сохранения срока годности клей следует хранить в холодильнике. Перед использованием достаньте его

из холодильника. Клей лучше всего использовать при комнатной или телесной температуре.

Процедура установки:

Лечение повреждённого копыта должно быть завершено, после чего готовится здоровое копыто для установки блока. Для обработки поверхности копыта следует использовать рашпиль Walkease, независимо от того, какими другими инструментами готовили копыто. Этот рашпиль обеспечивает правильную чистую и ровную поверхность, к которой будет приклеиваться пенный блок Walkease. Рашпиль необходимо содержать в чистоте.

Обращайтесь с пенным блоком Walkease осторожно, следя за тем, чтобы клеевая поверхность осталась чистой. Проверьте размер и форму блока на копыте. Выберите правильный размер, который будет поддерживать всю стенку копыта, но без значительного перекрытия.

Всегда надевайте перчатки при работе с быстрым клеем Walkease. Нанесите клей, используя весь 2 мл тюбик одноразового использования, чтобы зафиксировать блок. После примерно 10 секунд равномерного давления вы почувствуете, как блок «схватывается». (В холодную погоду процесс может занять больше времени.) Сразу после «схватывания» опустите копыто, чтобы животное смогло полностью перенести вес на блок для завершения сцепления. Пенный блок Walkease не прикрепится правильно, если на него не будет приложен вес до полного

отверждения клея.

Клей Walkease Rapid очень быстро схватывается под весом животного. Избыточный клей выдавливается, и пенный блок Walkease принимает форму поверхности копыта. Это увеличивает площадь контакта, обеспечивая более прочное сцепление. В холодную погоду время сцепления может немного увеличиться, поэтому дайте животному немного дольше постоять на блоке, прежде чем отпускать его из фиксатора.

Пенные блоки Walkease обычно не требуют удаления. Они разлагаются естественным образом примерно через 2 недели.

Дополнительные блоки и клей можно заказать через вашего дилера Shoof.



Рисунок 1. Обработайте повреждённую копытину по необходимости.

Рисунок 2. Используйте рашпиль для подготовки поверхности копыта к приклеиванию.

Рисунок 3. Нанесите весь тюбик клея на пенный блок Walkease.

Рисунок 4. Плотно прижмите колодку к здоровому копыту, перекрывая копытную стенку.

Рисунок 5. немедленно опустите ногу скота, чтобы перенести его вес на блок.

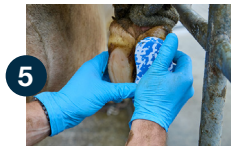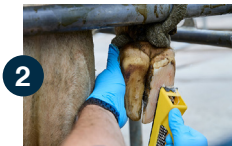

Walkease-vaahdolohkot on valmistettu erityisesti kehitystä etyleeni-vinyylasetaatti (EVA) -materiaalista. Ne kiinnitetään kavioon syanoakrylaattiliiman avulla. Walkease-vaahdolohkot ovat edullisia ja helppoja käyttää. Erityisiä taitoja tai kokemusta ei tarvita. Tämä ohjekirja on luettava ja ohjeita on noudatettava tarkasti. Kaikki poikkeamat näistä ohjeista voivat johtaa liiman epäonnistumiseen.

Walkease-vaahdolohkoja on tarkoitettu pienten kavion vammojen hoitoon. Ne soveltuvat erinomaisesti ohuiden kaviopohjien ja muiden sairauksien hoitoon, jotka vaativat noin 2 viikon kohotusta. Vakavissa vammoissa, jotka vaativat pitkäaikaista seisoamista, tulee harkita muita järjestelmiä, kuten Walkease-hybridivaahdolohkoja.

Walkease Rapid Glue -liima eroaa useimmista muista kaviolohkoliimoista. Liiman aktivoimiseksi tarvitaan luonnollista kosteutta kaviosta ja ilmasta. Kavioita ei saa kuivata keinotekoisesti (kuuma ilma tai alkoholi). Erittäin kylmässä ja kuivassa säässä liiman aktivoitumiseen voi kulua enemmän aikaa. (Hengittäminen lähelle liimattavaa pintaa muutaman kerran ennen kaviolle asettamista auttaa.)

Säilyvyysajan ylläpitämiseksi liima tulisi säilyttää jääkaapissa. Ota se jääkaapista ennen käyttöä. Liimaa on parasta käyttää noin huoneenlämpöisenä tai kehonlämpöisenä.

Kiinnittäminen:

Vamman saanut koura on hoidettava loppuun, minkä jälkeen terve koura valmistellaan lohkon kiinnitystä varten. Walkease-kaapimia tulisi käyttää kavion pinnan viimeistelyyn riippumatta siitä, mitä muita työkaluja on käytetty kavion valmistelussa. Tämä kaapiminen takaa oikean, puhtaan ja tasaisen pinnan, johon Walkease-vaahdolohko tarttuu. Kaapiminen on oltava puhdas.

Käsittele Walkease-vaahdolohkoa huolellisesti varmistaen, että liimattava pinta pysyy puhtaana. Testaa lohkon koko ja muoto kaviolla. Valitse oikea koko, joka tukee koko kavion seinämää, mutta ei aiheuta suurta päällekkäisyyttä.

Käytä aina suojakäsineitä Walkease Rapid Glue -liiman käsittelyssä. Levitä liima käyttämällä koko 2 mL:n kertakäyttöputken sisältö lohkon kiinnittämiseksi. Noin 10 sekunnin tasaisen paineen jälkeen tunnet lohkon "tarttuvan". (Kylmemmässä säässä voi kestää hieman kauemmin.) Heti tarttumisen jälkeen laske kaviot, jotta eläin voi laittaa koko painonsa lohkolle liiman täydellistä kiinnittymistä varten. Walkease-vaahdolohko ei kiinnity kunnolla, jos painoa ei kohdisteta ennen liiman täydellistä kovettumista.

Liima kovettuu erittäin nopeasti eläimen painon alla. Liian suuri liima puristuu ulos ja lohko mukautuu kavion pintaan. Tämä

parantaa kontaktipintaa ja antaa vahvemman kiinnityksen. Kylmässä säässä liiman kovettumisaika voi hieman pidentyä, joten anna eläimen seistä loholla hieman pidempään ennen kuin vapautat sen puristimesta.

Walkease-vaahdolohkoja ei yleensä tarvitse poistaa. Ne rapautuvat luonnollisesti noin kahden viikon kuluttua.

Lisälohkoja ja liimaa voi tilata Shooof-jälleenmyyjältäsi.


Kuva 1. Hoida lehmän loukkaantunutta kynttä tarpeen mukaan.

Kuva 2. Käytä raspia toisen varvasosan valmisteluun liimaamista varten.

Kuva 3. Levitä koko tuubi liimaa Walkease vaahtomuovilukkoon.

Kuva 4. Paina tuki napakasti terveeseen varvasosaan kavion ulkoseinämän yli

Kuva 5. Laske lehmän jalka heti alas, jotta se voi astua painollaan tuen päälle

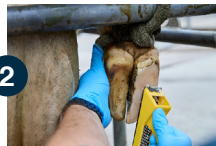

Walkease Skumblock är tillverkade av ett specialformulerat etylen-vinylacetat (EVA)-material. De fästs på klöven med hjälp av ett cyanoakrylatlim. Walkease Skumblock är kostnadseffektiva och lätta att applicera. Särskilda färdigheter eller erfarenhet krävs inte. Instruktionerna i detta häfte måste följas noggrant. Avvikelser från dessa instruktioner kan leda till att limmet inte fäster.

Walkease Skumblock är avsedda för att reparera mindre klövsador. De är idealiska för återhämtning från tillstånd som tunna sulor och andra problem som kräver cirka 2 veckors höjning. För svåra skador som kräver långvarig stående bör andra system som Walkease hybridskumblock övervägas..

Walkease Snabblim skiljer sig från de flesta andra lim för klövsblock. Den naturliga fukten i klöven och i atmosfären behövs för att aktivera limmet. **Klöven får inte torkas artificiellt (varmluft eller alkohol).** I mycket kallt väder, när luften är mycket torr, kan det ta längre tid att aktivera limmet. (Att andas nära den limmade ytan några gånger innan applicering på klöven kan hjälpa.)

För att bibehålla hållbarheten bör limmet förvaras i kylskåp. Ta ut det ur kylskåpet innan användning. Limmet används bäst vid ungefär rumstemperatur eller kroppstemperatur.

Monteringsanvisningar:

Behandlingen av den skadade klöven måste slutföras innan den friska klöven förbereds för montering av blocket. Walkease rasp ska användas för att jämna till klövens yta, oavsett vilka andra verktyg som kan ha använts för att förbereda klöven. Denna rasp ger en korrekt, ren och plan yta för att Walkease Skumblock ska fästa ordentligt. Raspen måste hållas ren.

Hantera Walkease Skumblock försiktigt och se till att limytan hålls ren. Testa blocket på klöven för storlek och form. Välj rätt storlek som stödjer hela klövväggen utan att skapa större överlappning.

Använd alltid handskar när du hanterar Walkease Snabblim. Applicera limmet med hela innehållet i 2 mL engångstuben för att fästa blocket. Efter cirka 10 sekunder med jämnt tryck kommer du känna att blocket "fäster". (Kan ta längre tid i kallt väder.) Sänk genast klöven efter att blocket har fäst, så att djuret kan lägga full vikt på blocket och fullborda limningen. Walkease Skumblock fäster inte ordentligt om vikt inte appliceras innan limmet har härdat helt.

Limmet härdar mycket snabbt under djurets vikt. Överskottslimmet pressas ut och blocket anpassar sig efter klövens yta. Detta förbättrar kontaktytan och ger en starkare bindning. I kallt väder kan härdningstiden öka något, så låt

djuret stå lite längre på blocket innan det släpps ur stallet.

Walkease Skumblock behöver vanligtvis inte tas bort. De eroderar naturligt efter ungefär 2 veckor.

Extra skumblock och Rapid-lim kan beställas via din Shoof-återförsäljare.



Fig 1. Behandla den skadade klon efter behov.

Fig 2. Använd raspen för att förbereda den intilliggande klon för limning.

Fig 3. Applicera ett helt limrör på Walkease-skumblocket

Fig 4. Tryck blocket ordentligt mot den friska klon och se till att det överlappar hovväggen.

Fig 5. Släpp snabbt ner benet så att kon kan lägga vikt på blocket.

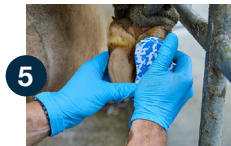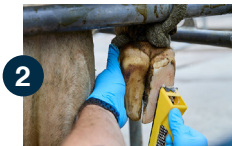

Walkease Sünger Bloklar, özel olarak formüle edilmiş bir etilen-vinil asetat (EVA) malzemesinden üretilmiştir. Bunlar, tırnağa bir siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılarak tutturulur. Walkease Sünger Bloklar düşük maliyetli ve uygulanması kolaydır. Özel bir beceri veya deneyim gerekmez. Bu kullanım kılavuzundaki talimatlarla uyulmalıdır. Bu talimatlardan sapılması, yapıştırıcının başarısız olmasına yol açabilir.

Walkease Sünger Bloklar, küçük tırnak yaralarının onarımı için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İnce tabanlar ve yaklaşık 2 hafta yükseltme gerektiren diğer durumların iyileşmesi için idealdir. Uzun süreli ayakta durmayı gerektiren ciddi yaralanmalar için Walkease hibrit köpük bloklar gibi diğer sistemler dikkate alınmalıdır.

Walkease Hızlı Yapıştırıcı, çoğu diğer tırnak blok yapıştırıcılarından farklıdır. Yapıştırıcının aktive olması için tırnak ve ortamın doğal nemi gereklidir. Tırnak yapay olarak kurutulmamalıdır (sıcak hava veya alkol ile). Hava çok kuru ve çok soğuk olduğunda, yapıştırıcının aktive olması için daha fazla zaman gerekebilir. (Yapıştırılan yüzeye birkaç kez yakın mesafeden nefes almak uygulamadan önce yardımcı olur.)

Raf ömrünü korumak için yapıştırıcı buzdolabında saklanmalıdır. Kullanımdan önce buzdolabından çıkarın. Yapıştırıcı, oda sıcaklığına veya vücut sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta en iyi şekilde kullanılır.

Uygulama:

Yaralı tırnak tedavisi tamamlandıktan sonra, sağlıklı tırnak blok yerleştirilmek üzere hazırlanmalıdır. Tırnak yüzeyini düzeltmek için Walkease törpüsü kullanılmalıdır; tırnak hazırlanırken başka hangi araçlar kullanılmış olursa olsun, bu törpü doğru, temiz ve düz bir yüzeye sağlar ve Walkease Sünger Blok'un yapışmasını kolaylaştırır. Törpü temiz tutulmalıdır.

Walkease Sünger Blok'u dikkatli bir şekilde tutun ve yapıştırma yüzeyinin temiz kalmasını sağlayın. Blokun tırnağa uygun boyut ve şekilde olup olmadığını test edin. Tüm tırnak duvarını destekleyecek, ancak büyük bir taşma yaratmayacak doğru boyutu seçin.

Walkease Hızlı Yapıştırıcı ile çalışırken her zaman eldiven giyin. Bloku sabitlemek için 2 ml'lik tek kullanımlık tüpün tamamını uygulayın. Yaklaşık 10 saniye boyunca sabit baskı uyguladıktan sonra blok "tutunma" hissi verecektir. (Soğuk havalarda bu süre biraz daha uzun olabilir.) "Tutunma" sağlandıktan hemen sonra tırnağı indirin, böylece hayvan bloka tam ağırlığını verebilir ve yapışma tamamlanır. Walkease Sünger Blok, yapıştırıcı tamamen sertleşmeden önce ağırlık uygulanmazsa düzgün şekilde tutunmaz.

Yapıştırıcı, hayvanın ağırlığı altında çok hızlı bir şekilde sertleşir. Fazla yapıştırıcı sıkışır ve blok, tırnak yüzeyine uyum sağlar. Bu, temas yüzeyini artırarak daha güçlü bir bağ oluşturur. Soğuk havalarda yapışma süresi biraz uzayabilir, bu yüzden hayvanı blok üzerinde biraz daha uzun süre bekletin ve ardından sıkıştırma aparatından serbest bırakın.

Walkease Sünger Bloklar genellikle çıkarılmaya gerek duymaz. Yaklaşık 2 hafta sonra doğal olarak erirler.

Ek bloklar ve yapıştırıcı, Shoof bayiniz aracılığıyla sipariş edilebilir.

Resim 1. Yaralı pençeyi gerektiği gibi tedavi ediniz.

Resim 2. Diğer pençeyi yapışmaya hazırlamak için törpü kullanınız.

Resim 3. Yapıştırıcı tüpünün tamamını Walkease köpük bloğuna ekleyin.

Resim 4. Toynak duvarının üzerine gelecek şekilde, sağlıklı pençenin üzerine sertçe bastırınız.

Resim 5. İneğin ayağını hemen indirin ki ağırlığını bloğa verebilsin.

